

La révolution Refill



Réduction de la quantité de matière jusqu'à **64%**

Gain de place jusqu'à **70%**

La révolution Refill





Une
précision
maximale



45 ans
d'expérience



Compétence
technique



Économie de
ressources



Une précision maximale, une conception sophistiquée et le plus haut niveau de pureté: c'est ce que vous pouvez exiger de nos produits.

Nous fabriquons des pointes de pipette ajustées depuis plus de 45 ans. Cette longue expérience, notre compétence technique et nos outils de production ultra-modernes nous ont permis de développer un nouveau système de recharge innovant et flexible. Il conviendra à toutes vos exigences et applications. Économe en matière, il est néanmoins solide, sûr, pratique et fiable.

Découvrez notre révolution Refill aux pages suivantes. Laissez-vous surprendre par des détails éprouvés. Découvrez de nouvelles fonctions et leurs avantages et pour finir, essayez-le !

Votre équipe SARSTEDT

Un système – quatre options



La boîte

Le pipetage est un élément clé de chaque laboratoire. Sarstedt a développé une nouvelle boîte de pointes qui est la solution robuste et universelle au coeur notre nouveau système de pointes de pipette. Grâce au marquage laser résistant figurant sur chaque plateau, vous avez accès rapidement à d'importantes informations comme le volume, le numéro de lot ou la date de péremption de manière fiable, confortable et rapide. La boîte est l'élément central de notre système de pointes.

p. 6




Le SingleRefill

Le développement durable est une préoccupation importante du quotidien. Le nouveau SingleRefill de SARSTEDT vous permet également de recharger des pointes à filtre de manière simple et économique. Le design clos protège les pointes de pipette des contaminations et permet ainsi une recharge hygiénique et écologique. Le Single Refill est la solution pour votre laboratoire durable.

p. 8



Permet des économies de
déchets jusqu'à **70 %**

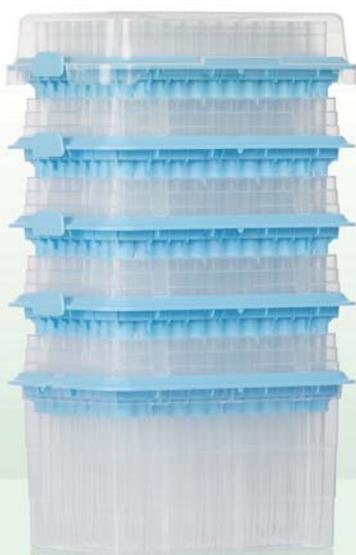

Le StackPack

Le traitement rapide de nombreux échantillons exige une grande efficacité. Depuis des années, le StackPack SARSTEDT est la solution optimale pour les manipulations rapides de pointes. Vous pouvez emboîter chaque portoir dans la boîte en un simple tour de main. Grâce à son design compact et stable, vous pouvez aussi directement utiliser les pointes à partir du StackPack. Le StackPack est une innovation pour un travail efficace.

p. 10



Le sachet

Une souplesse maximale est indispensable. Le conditionnement en sachet SARSTEDT est l'alternative économique. Une fermeture à pression vous permet d'ouvrir et de refermer le sachet de manière hygiénique. La fermeture avec témoin d'intégrité supplémentaire vous assure que les pointes sont garanties exemptes de contamination jusqu'à leur utilisation. Le sachet est la solution économique pour les applications standards.

p. 14



La Boîte – universelle et robuste



Centrale. Fiable. Confortable.



Un outil de travail polyvalent

La boîte robuste est l'outil universel de votre laboratoire. Vous préférez travailler directement à partir d'une boîte préremplie ? Vous privilégiez les systèmes de recharge écologiques ? Ou vous préférez recharger vous-même vos pointes ? La boîte est la base de chaque méthode de travail.



Système d'empilage faiblement encombrant

La conception harmonisée du couvercle et du fond facilite l'empilage de plusieurs boîtes. Les nouvelles boîtes de pointes compactes et solides conviennent parfaitement à un stockage optimisé.



Fermeture sûre

Le mécanisme de fermeture ajusté fait de la boîte un partenaire fiable au quotidien. Bien refermée, elle résiste aussi aux conditions difficiles liées au transport, au stockage et à l'autoclavage.



CONSEIL Des surfaces lisses – des boîtes glissantes ? Alors essayez nos pieds en caoutchouc disponibles en option ! Il suffit de les emboîter dans le fond pour garantir un maintien maximal sur toutes les paillasses.



La SingleRefill – écologie et pureté





Une protection maximale

La liaison optimale entre le fond et le couvercle protège intégralement les pointes contre toute contamination, même après avoir retiré le film de conditionnement. La SingleRefill peut ainsi être déposée en toute simplicité dans la boîte. Pour un maximum d'hygiène et de sécurité.



Une pureté optimale

Le système de recharge de haute pureté convient tout particulièrement aux applications très exigeantes. Il est enfin possible de recharger aussi les pointes à filtre – même avec notre standard de pureté élevé Biosphere® plus !

Pérenne. Protégée. Hygiénique.



Une écologie sans compromis

La fabrication innovante permet une économie de matériaux allant jusqu'à 41 % par rapport à la boîte. Cette conception légère permet des économies d'énergie et de ressources. Tous les composants du SingleRefill sont empilables pour leur élimination, ce qui permet de réduire encore le volume de déchets à un niveau maximal !



CONSEIL Volume, numéro de lot, péremption – grâce au marquage laser résistant figurant sur chaque plateau, ces informations précieuses sont toujours disponibles même en cas d'insertion dans la boîte! Le code couleur habituel et bien connu du volume vous aide à trouver la pointe recherchée en un clin d'œil.



Le StackPack – économique et faiblement encombrant





Système empilé économique

Le système d'emboîtement sophistiqué offre de la place pour 480 pointes, et ce sur la même hauteur que deux boîtes. Vous économisez ainsi 70 % d'espace sur l'emplacement d'une seule boîte !

Efficacité. Stabilité.
Économie.



Une protection stable

Les supports périphériques protègent les pointes de toute contamination. Leur construction solide forme l'ossature du StackPack. Grâce aux points d'enclenchement clairement identifiés sur les côtés, le prélèvement de chaque plateau est un jeu d'enfant.



Sécurité anti-chute exceptionnelle

L'ancrage ferme des plateaux les uns sur les autres assure le StackPack même contre les petits accidents quotidiens. Sa stabilité exceptionnelle lui permet de parer sans problème aux basculements ou aux chutes.



CONSEIL Un important débit, de nombreuses pointes – aucun problème ! Travaillez directement à partir du StackPack. Le StackPack reste stable à tout moment grâce à sa rigidité et à son châssis.

Une boîte pleine – simple et rapide



Boîte – retirer le plateau vide



Appuyer sur les clips latéraux.

Soulever le plateau ...

... et l'éliminer de manière peu encombrante.

Utilisation du SingleRefill



Insérer la SingleRefill complète dans la boîte.

Enclencher en exerçant une légère pression.

Retirer le couvercle et poursuivre le travail.

Remplir à partir du StackPack



Appuyer sur les points d'enclenchement à l'avant et à l'arrière.

Tirer vers le haut.

Insérer dans la boîte et enclencher. Retirer le couvercle et poursuivre le travail.



Le sachet – alternative économique



Hygiénique. Abordable. Souple.



Fermeture confortable

Le sachet peut être refermé de manière hygiénique. Vous pouvez ainsi recharger progressivement vos boîtes de pointes à la main en fonction des besoins.



Scellement sûr

La fermeture avec témoin d'intégrité supplémentaire vous assure que les pointes sont exemptes d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de la PCR jusqu'à leur utilisation.



Variantes colorées

La coloration jaune et bleue des pointes de 200 μ l et 1000 μ l facilite encore l'identification rapide des deux pointes !

CONSEIL Les étiquettes peuvent être retirées sans résidus sur le couvercle des boîtes pour la recharge de pointes à partir du sachet. La boîte devient ainsi une boîte à usage multiple universelle pour chaque variante de pointe.

La révolution Refill – pérennité et respect de l'environnement



Économie d'énergie

Notre système de boîte associe une stabilité particulièrement élevée à une utilisation minimale de matière. Sa conception sophistiquée permet des économies de plastique et donc d'énergie lors de la fabrication !



Peu encombrant

Dans le StackPack, 480 pointes occupent autant de place que 192 pointes dans 2 boîtes. Il est ainsi possible d'économiser de l'espace de stockage et d'optimiser la logistique, et donc la consommation de carburant lors du transport !



Économie de ressources

Comparativement à la boîte, la fabrication du StackPack, avec son conditionnement idéal, permet d'économiser jusqu'à 64% de matériaux. Cela permet de diminuer les ressources ainsi que la consommation de matière plastique !



Réduction des déchets

Après usage, chaque composant du système de boîte peut être empilé l'un sur l'autre. Cela permet de gagner du volume lors de l'élimination et la quantité de déchets est également réduite !



Votre choix ! Vous restez maître dans le choix du système qui vous convient. Vous pouvez sélectionner nos solutions de pointes pratiques selon vos souhaits et vos exigences, et ce de manière écologique et économique !

Confortable et contrôlée

Variée

Nos pointes de pipette sont aussi variées que vos domaines d'application. Vous pouvez choisir entre différentes pointes à filtre, pointes Low Retention et pointes sans filtre. Vous trouverez chez nous la longueur optimale de pointe et la forme convenant à chaque application, c'est garanti !

Certifiée

Chaque lot est soumis à un contrôle visuel, dimensionnel et fonctionnel approfondi. Un laboratoire indépendant confirme le respect des valeurs de seuil des certifications Biosphere® plus et PCR Performance Tested. Nos certificats de lot documentent ce processus d'évaluation et de validation.

Conforme

Il est important d'utiliser des pointes de pipette conformes à la norme internationale ISO 8655-2, tout particulièrement au sein de laboratoires certifiés, accrédités ou conformes aux BPF. Nos certificats de conformité prouvent le contrôle régulier de cette précision.

Homologuée

Les pointes SARSTEDT présentent un marquage CE et sont autorisées au titre de dispositifs de diagnostic in vitro. Elles peuvent être utilisées pour l'analyse d'échantillons à des fins diagnostiques.

Compatible

Les pointes SARSTEDT conviennent de manière universelle aux pipettes des principaux fabricants. Grâce à elles, l'utilisation de plusieurs types de pipette n'est plus un problème.

Certifiée et fiable

Une qualité standard sans compromis.

Que cela soit dans la boîte, dans le SingleRefill, le StackPack ou le sachet – toutes les nouvelles pointes SARSTEDT portent le label « PCR Performance Tested » et peuvent être immédiatement utilisées dans tous les domaines de l'analyse de l'ADN et de l'ARN.

Le plus en matière de sécurité

Maintenant aussi disponible dans le nouveau SingleRefill.

Le nouveau Biosphere® plus SingleRefill combine l'excellente pureté des pointes SARSTEDT et le système de boîte confortable et économique.





Visionner dès maintenant notre vidéo
de présentation produit :
www.refillrevolution.tips

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray, Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel. : +33 384 31 95 95

Fax : +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Nous imprimons sur du papier certifié FSC.